

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

PANTALLAS FACIALES CONTRA SALPICADURAS - **PROTEVID**

POLISUR

POLISUR 2000 SLU

Carretera Nacional 444, km. 2,95

CP 21440 Lepe, Huelva (España)

☎ 959 380 224

✉ info@polisur.es

www.polisur.es



**EN 166:2001 modificada por el
Procedimiento 25DAT116-
Procedimiento de certificación de
pantallas faciales y gafas para
proteger contra COVID-19**

Contenidos:

1.	INTRODUCCIÓN.....	2
2.	EMPLEO.....	2
2.1.	RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.....	2
2.2.	MANTENIMIENTO.	3
2.3.	ALMACENAJE.....	3
2.4.	EMBALAJE.	3
2.5.	CAMPO DE USO.....	3
3.	MARCADO Y PRESTACIONES.	3
4.	LIMITACIONES DE USO.	3
5.	COLOCACIÓN Y AJUSTE.	4
6.	ADVERTENCIAS.....	4

1. INTRODUCCIÓN.

Con este manual se pretende proporcionar al cliente las pautas de operación, mantenimiento e instrucciones en el uso del presente producto suministrado por el fabricante.



Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN 166:2001 parcialmente aplicada de acuerdo con el procedimiento 25DAT116 - Procedimiento de certificación de pantallas faciales y gafas para proteger contra COVID-19, que le son aplicables, según consta en el certificado nº **0161/xxxx/yy** de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Es EPI contiene los siguientes materiales:

- Polipropileno (PP).
- Polioetileno de Tereftalato (PET).
- Poliisopreno (sin latex).

2. EMPLEO.

La pantalla facial se coloca en la cabeza del usuario ajustando el arnés hasta conseguir la perfecta colocación de esta, dejando “las manos libres” para la realización de las operaciones.

2.1. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

Se pueden utilizar dos tipos de desinfectante diferente, con sus correspondientes proporciones. Todas las disoluciones desinfectantes deben ser a base de agua.

Preparación para desinfectante con lejía



Preparación para desinfectante con alcohol



Después del proceso de desinfección se deberá aclarar con agua y jabón. Una vez aclarada la pantalla, secar con un paño suave desinfectado.

2.2. MANTENIMIENTO.

Para proteger el ocular:

- No intente desmontar o forzar el equipo, ya que la protección adecuada del mismo depende de ello.
- El usuario no debe modificar el diseño o la configuración del equipo.
- Tenga el equipo limpio antes de su uso para garantizar su funcionamiento.
- Después de su utilización, el equipo se debe almacenar en lugares protegidos de la humedad y radiación.
- Este producto debe alejarse de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos, etc.

2.3. ALMACENAJE.

- Cada ocular se embala en una bolsa que la protege de polvo y la humedad.
- Reponer en la bolsa protectora cuando no esté en uso.
- Almacenar entre 5 y 40 °C, con una humedad menor del 90%.

2.4. EMBALAJE.

- Se suministra la unidad en bolsa individual de polietileno.
- Se suministra en cajas de cartón de 70 unidades.

2.5. CAMPO DE USO.

Destinado a:

Protección de los ojos y la cara en actividades sanitarias y en las que se requiera protección frente al virus COVID-19.

3. MARCADO Y PRESTACIONES.

Información: El EPI PROTEVID no requiere marcado en el propio producto.

En caso de emplear un marcado, se propone el siguiente:

- Pantalla facial para protección frente COVID-19.
- EN 166:2001 modificada por COVID-19

4. LIMITACIONES DE USO.

- El equipo no está diseñado para ser utilizado por niños.
- Este equipo de protección individual, única y exclusivamente, está diseñado para la función especificada por el fabricante, es decir, utilizarlo como equipo para proteger de la protección de salpicaduras.

El uso de este tipo de pantallas es exclusivo para la protección frente a salpicaduras no corrosivas, ni incandescentes. Estas pantallas han sido diseñadas para la protección del usuario frente a proyecciones de partículas esputadas por un paciente contagiado con un virus que pueda ser transmitido por tos, estornudos, saliva, etc. como el coronavirus COVID-19.

Así pues, esta pantalla facial no protege en frente a impactos mecánicos, radiaciones ópticas, metales fundidos, polvo, gases o arcos eléctricos.


5. COLOCACIÓN Y AJUSTE.



**Colocamos la diadema
bocabajo en una
superficie plana.**



**Doblamos la lámina de PET
con la forma
de la diadema.**

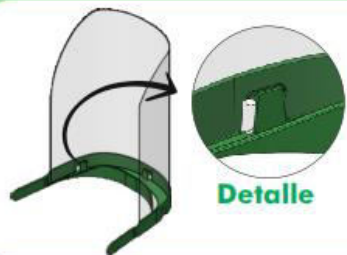

**Hacemos coincidir los
orificios de la lámina
con los clics
de la diadema**



**Pasamos la goma
elástica por el tetón
de la parte trasera de
la diadema.**

6. ADVERTENCIAS.

- Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en personas sensibles.
- Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.
- Es conveniente sustituir los oculares rayados o deteriorados.
- El dispositivo de protección ocular (pantalla facial) no ofrece protección contra impactos mecánicos.
- El dispositivo de protección ocular (pantalla facial) solo debe ser utilizado trabajadores tanto del ámbito sanitario como en actividades donde se requiera protección frente al virus COVID-19 y solo durante la vigencia de la actual emergencia COVID-19.
- El dispositivo de protección ocular (pantalla facial) protege contra gotas y salpicaduras de líquidos. Esto reduce el riesgo de infección por gotas.
- El dispositivo de protección ocular se puede combinar gafas.
- El dispositivo puede reutilizarse si es limpiado según las instrucciones del fabricante.

EL EPI TIENE UN VIDA ÚTIL DE 1 AÑO.

La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

Año de fabricación: 2020